



PROCESSUS D'INSTALLATION

Veillez lire **attentivement** ce document avant
toute installation

SERPO – POSO'NET : 02 98 55 82 09

SOMMAIRE

1	INSTALLATION DE(S) IMPRIMANTE(S)	3
1-1	BROTHER TD-2020 / TD-2120N / TD-2130N	3
1-2	ZEBRA LP 2824 / LP 2824 PLUS.....	6
2	INSTALLATION DE POSO'NET	9

1 Installation de(s) imprimante(s)


1-1 BROTHER TD-2020 / TD-2120N / TD-2130N

ATTENTION : retirez impérativement le cache de protection orange du cutter du capot de l'imprimante BROTHER !

Après avoir installé le pilote BROTHER & le dernier setup POSO'NET :

- Ouvrir le **Panneau de configuration**
- **Périphériques et imprimantes**
- **Sélectionner l'imprimante**
- Clic droit => « **Propriété de l'imprimante** » => onglet « **paramètre du périphérique** »
- Cliquez sur « **Paramètres de l'appareil** » cliquez sur « **Propriétés** » et sélectionnez, pour la « **Mise hors tension auto** », « **Aucune** »



ATTENTION : il faut absolument sélectionner « Aucune » sinon l'imprimante s'éteint toutes les 60 min ...

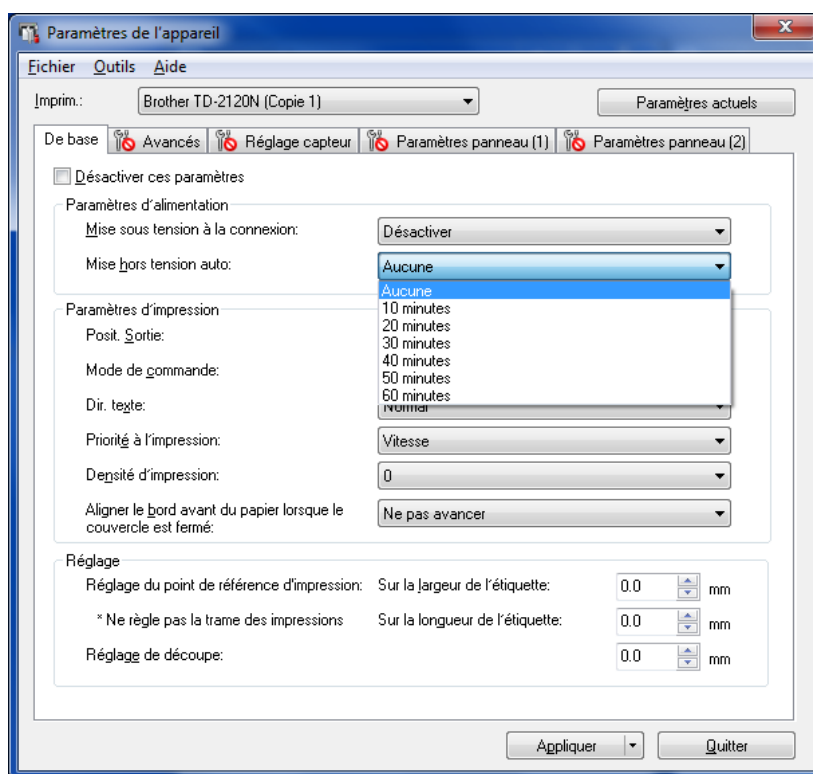

Paramétrage MANUEL des BROTHER

Cliquez sur « **Configuration du format de papier ...** » pour créer un format papier

« **POSONET 56x26mm** ».

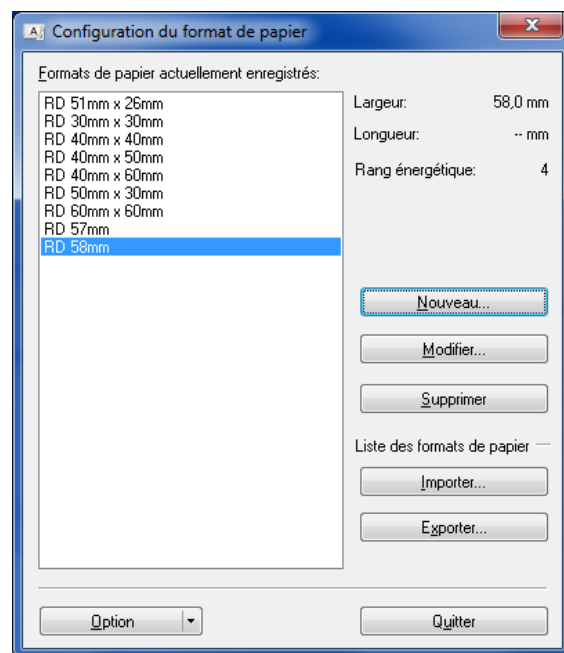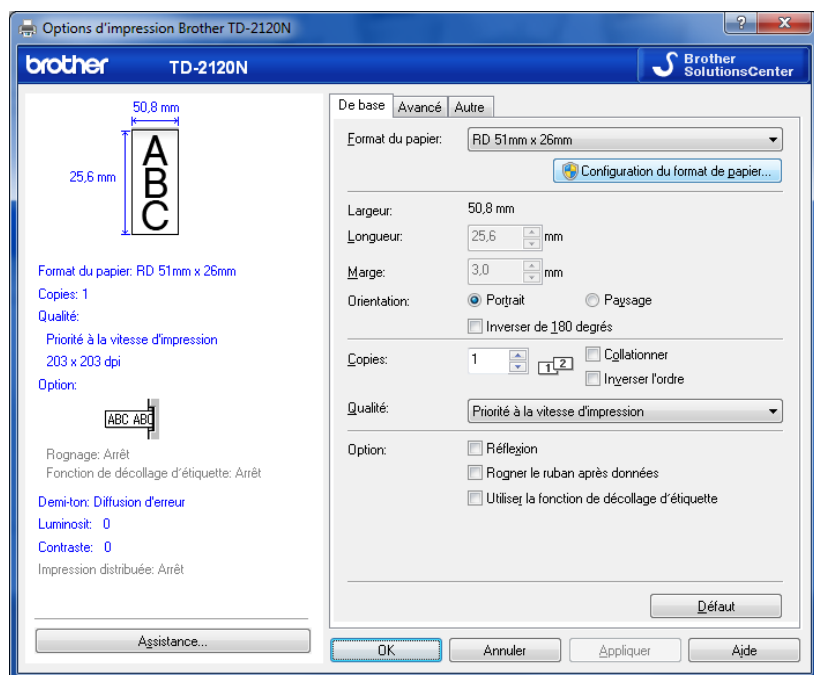

Cliquer sur « **Nouveau** » pour créer le format papier « **POSONET 56x26mm** » avec ces valeurs et modifier les « **Réglages d'impression avancés** » → **Passer le rang énergétique de 4 à 7** puis « **Quitter** ».

The 'Nouveau' dialog box is used to create a new paper format. It includes the following fields and options:

- Nom du format de papier:** POSONET 56x26
- Types de papier:** Etiquette Pré-découpée
- Dimensions:**
 - Largeur: 56 mm
 - Longueur: 26 mm
 - Espacement des étiquettes: 3,0 mm
- Marges:**
 - Marge gauche: 0 mm
 - Marge droite: 0 mm
 - Marge supérieure: 0 mm
 - Marge inférieure: 0 mm
- Rang énergétique:** 7
- Capteur de support (transmissif/espaceur):** 0
- Sensibilité de détection:** 0
- Réglage de la luminosité:** 0
- Capteur de support (réflectif/barre):** 0
- Sensibilité de détection du marquage:** 0
- Réglage de la luminosité:** 0

Buttons: Ajouter, Annuler, Réglages d'impression avancés...

The 'Réglages d'impression avancés' dialog box allows for fine-tuning print settings. It includes the following fields and options:

- Réglages du point de référence d'impression:** Indiquez les réglages à apporter au point de référence. Les problèmes d'alignement d'impression résultant de différences au niveau des modèles d'imprimantes ou les marges fixes de certaines applications peuvent être corrigés.
- Sur la largeur de l'étiquette:** 0,0 mm
- Sur la longueur de l'étiquette:** 0,0 mm
- Réglage de découpe:** 0,0 mm
- Rang énergétique:** 7
- Capteur de support (transmissif/espaceur):** 0
- Sensibilité de détection:** 0
- Réglage de la luminosité:** 0
- Capteur de support (réflectif/barre):** 0
- Sensibilité de détection du marquage:** 0
- Réglage de la luminosité:** 0

Buttons: OK, Annuler

Sélectionner le nouveau format « **POSONET 56x26mm** » ainsi créé, puis « **Appliquer** », puis « **OK** ».

The 'Configuration du format de papier' dialog box shows a list of currently registered paper formats. The 'POSONET 56x26mm' format is highlighted. It includes the following fields and options:

- Formats de papier actuellement enregistrés:**
 - RD 51mm x 26mm
 - RD 30mm x 30mm
 - RD 40mm x 40mm
 - RD 40mm x 50mm
 - RD 40mm x 60mm
 - RD 50mm x 30mm
 - RD 60mm x 60mm
 - RD 57mm
 - RD 58mm
 - POSONET 56x26mm
- Largeur:** 50,8 mm
- Longueur:** 25,6 mm
- Rang énergétique:** 4
- Buttons:** Nouveau..., Modifier..., Supprimer, Importer..., Exporter...
- Option:** Quitter

The 'Options d'impression Br2120 sur ZARA' dialog box shows the print settings for the Br2120 printer. It includes the following fields and options:



- Format du papier:** RD 51mm x 26mm
- Largeur:** 50,8 mm
- Longueur:** 25,6 mm
- Marge:** 0 mm
- Orientations:**
 - ☐ Inverser de 180 degrés
 - ☐ Collationner
 - ☐ Inverser l'ordre
- Copies:** 1
- Qualité:** Priorité à la vitesse d'impression
- Option:**
 - ☐ Réfection
 - ☐ Rogner le ruban après données
 - ☐ Utiliser la fonction de découpage d'étiquette
- Buttons:** Assistance..., OK, Annuler, Appliquer, Aide

1-2 ZEBRA LP 2824 / LP 2824 Plus



ATTENTION : il faut impérativement installer la LP 2824 Plus EPL, et non ZPL, sinon il vous faudra recommencer l'installation après avoir supprimé tous les pilotes SEAGULL !!

Paramétrage MANUEL des ZEBRA


Dans « **Options d'impression** », « **Mise en page** », cliquer sur « **Nouveau** » pour créer un nouveau support « **POSONET 56x26** » avec ces valeurs.

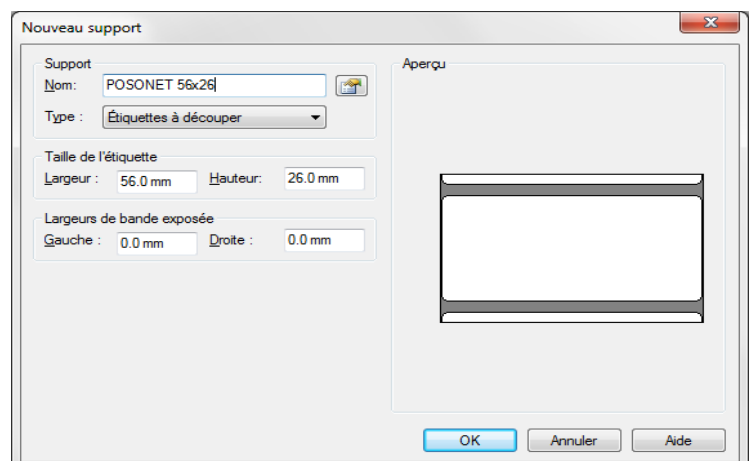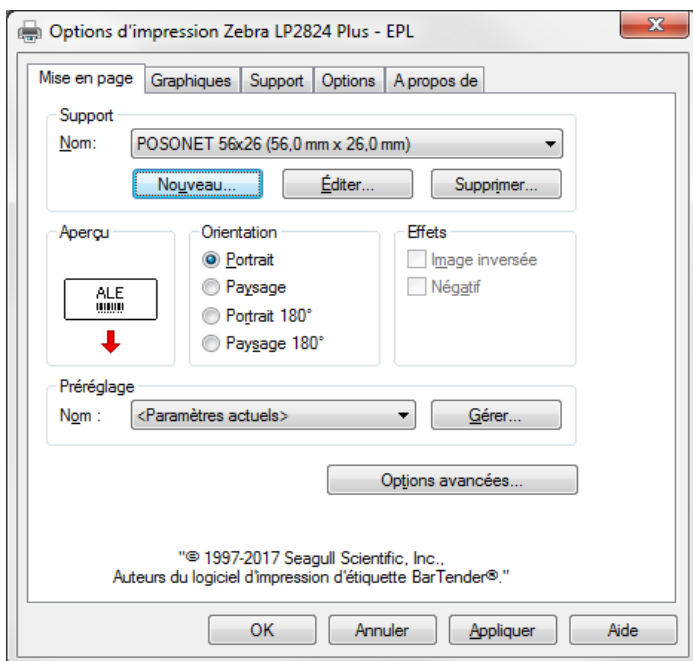




Puis dans « **Options avancées** »

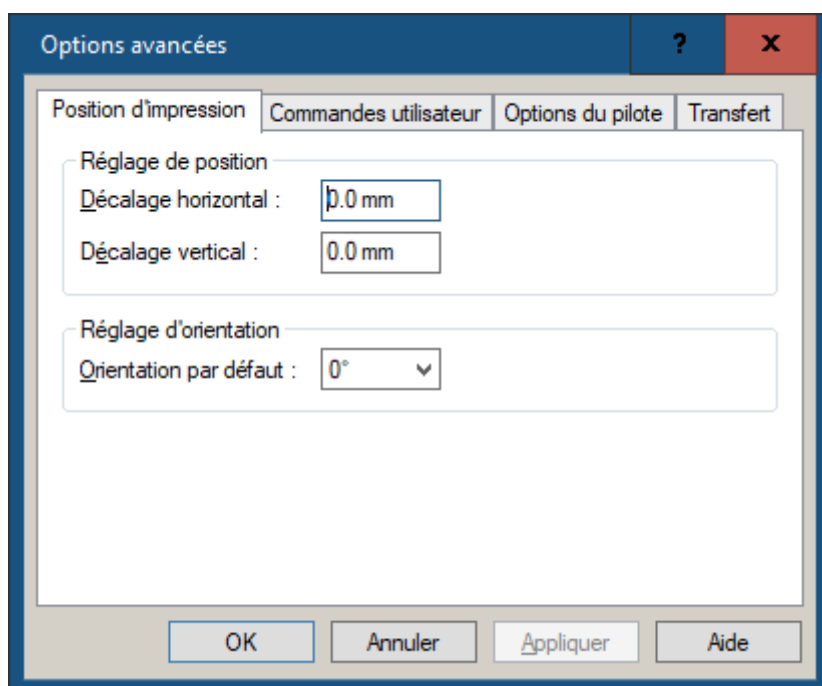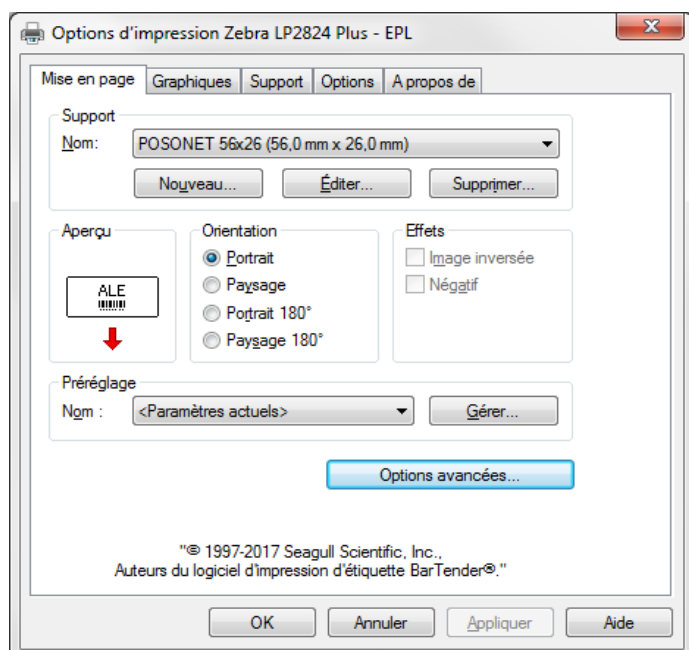

Enfin dans « **Options** »

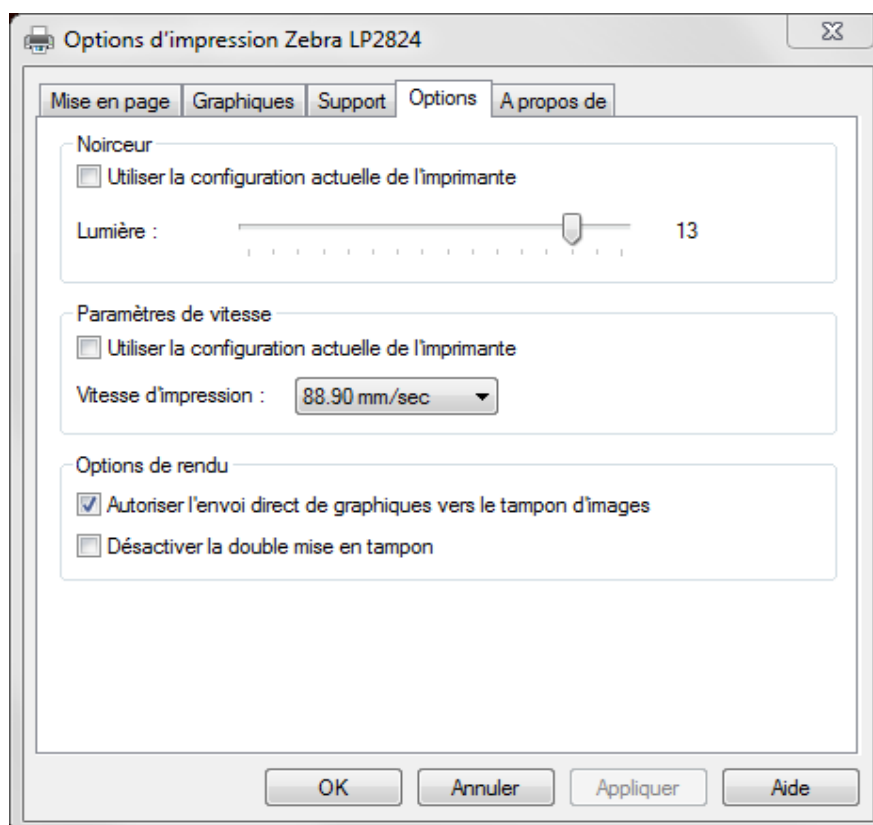

ATTENTION : si l'imprimante est partagée, vérifier que la case « Communication bidirectionnelle » soit toujours décochée !

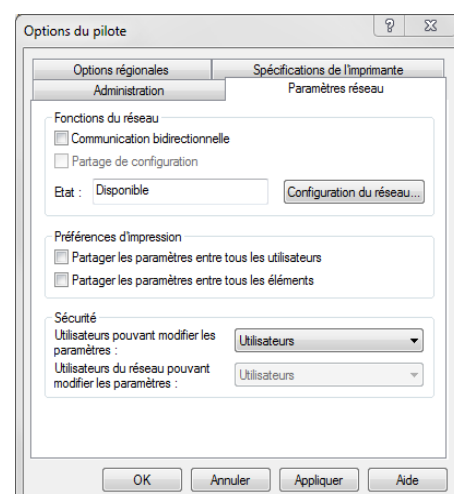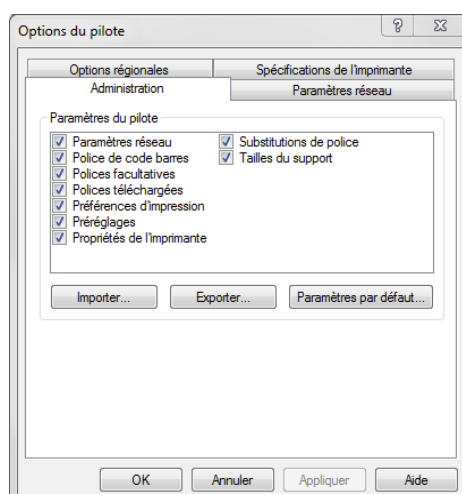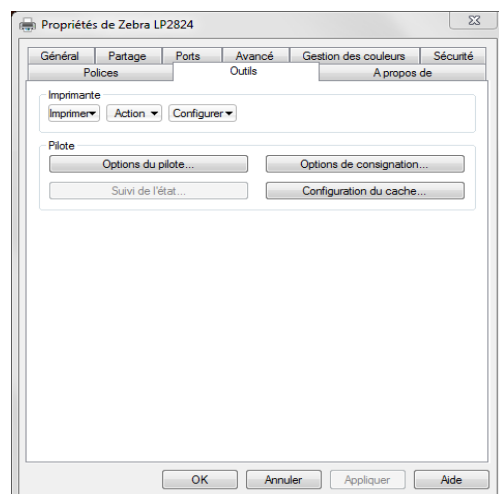


2 Installation de POSO'NET

Téléchargement

Vous devez **TOUJOURS** télécharger et installer le dernier SETUP de POSO'NET à partir de notre site : www.posonet.net, « Support », « Espace installateur ».


À l'installation, ouverture de cette fenêtre MS DOS

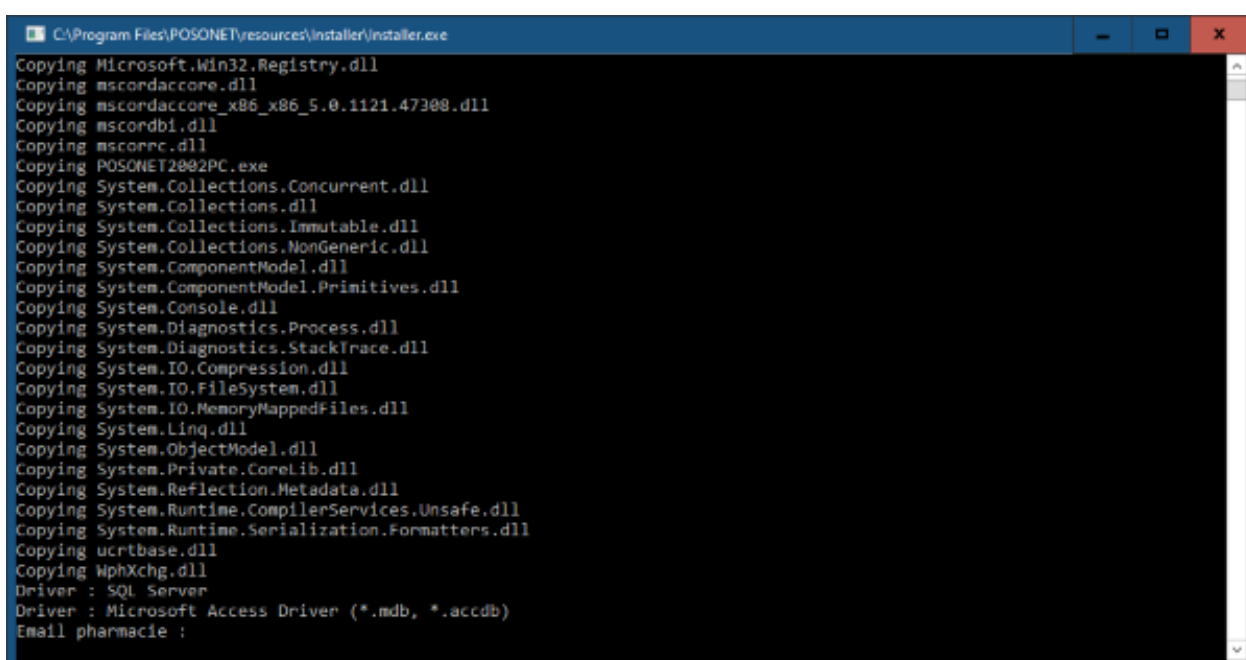


```
C:\Program Files\POSONET\resources\installer\installer.exe
Copying Microsoft.Win32.Registry.dll
Copying mscordacore.dll
Copying mscordacore_x86_x86_5.0.1121.47308.dll
Copying mscordbi.dll
Copying mscorrc.dll
Copying POSONET2002PC.exe
Copying System.Collections.Concurrent.dll
Copying System.Collections.dll
Copying System.Collections.Immutable.dll
Copying System.Collections.NonGeneric.dll
Copying System.ComponentModel.dll
Copying System.ComponentModel.Primitives.dll
Copying System.Console.dll
Copying System.Diagnostics.Process.dll
Copying System.Diagnostics.StackTrace.dll
Copying System.IO.Compression.dll
Copying System.IO.FileSystem.dll
Copying System.IO.MemoryMappedFiles.dll
Copying System.Linq.dll
Copying System.ObjectModel.dll
Copying System.Private.CoreLib.dll
Copying System.Reflection.Metadata.dll
Copying System.Runtime.CompilerServices.Unsafe.dll
Copying System.Runtime.Serialization.Formatters.dll
Copying ucrtbase.dll
Copying WpXchg.dll
Driver : SQL Server
Driver : Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)
Email pharmacie :
```

- Rentrer l'e-mail de l'officine
- Attendre l'affichage du message " Press to key to exit "
- Cliquer sur "Entrée"

- 1 – Entrer l'email identifiant de l'officine dans POSO'NET puis cliquer sur « Se connecter »

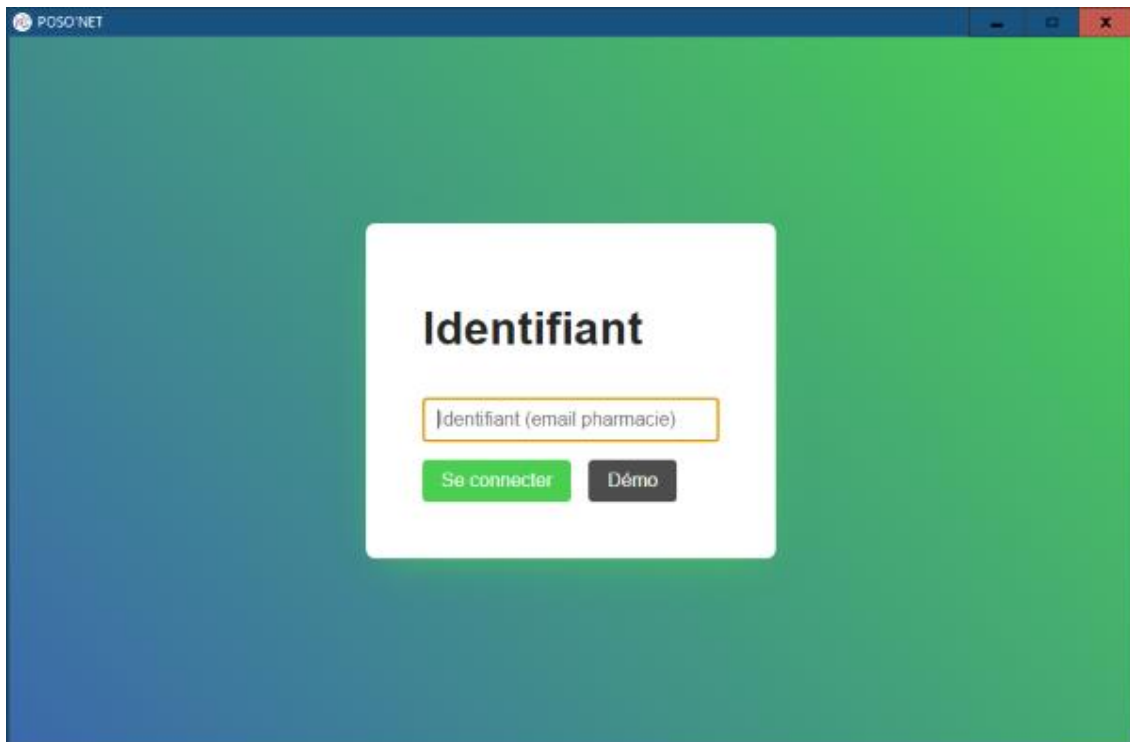


- 2 - Paramètres

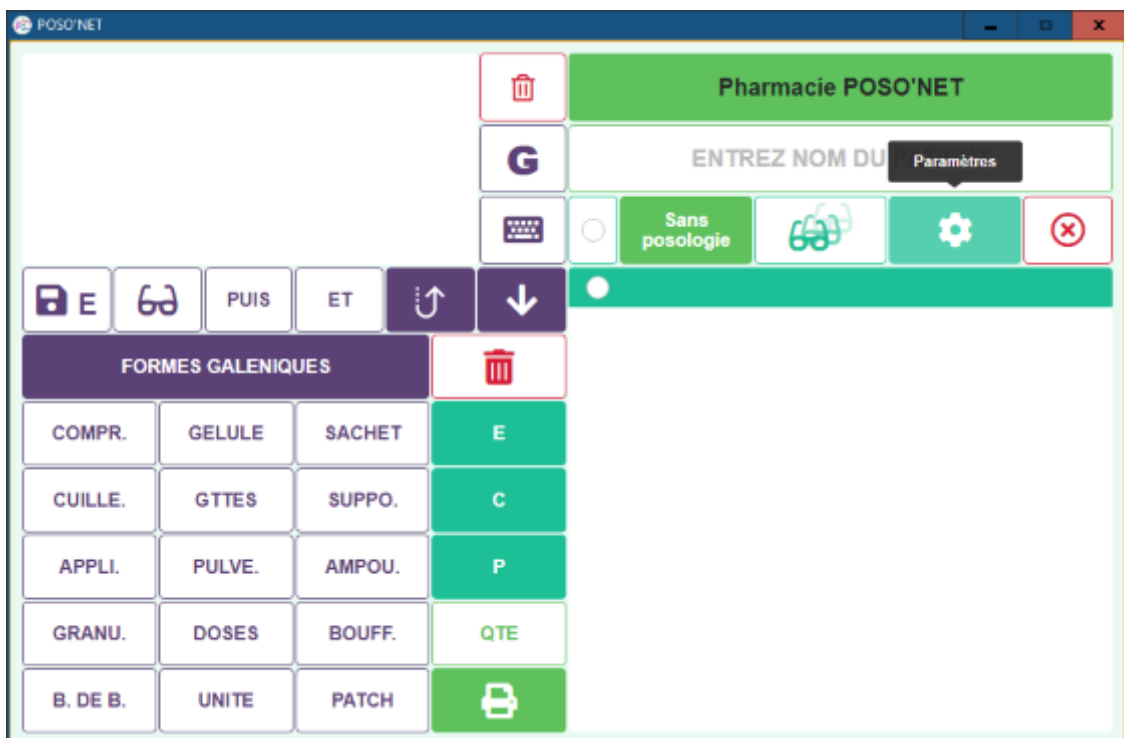


3 – Impression

- Sélectionner marge de gauche + marge haute (diminuer ou augmenter les marges en fonction du résultat sur l'étiquette)
 - Sélectionner l'imprimante de destination
- Note : quand vous cliquez sur les X pour fermer les fenêtres, vos modifications sont sauvegardées

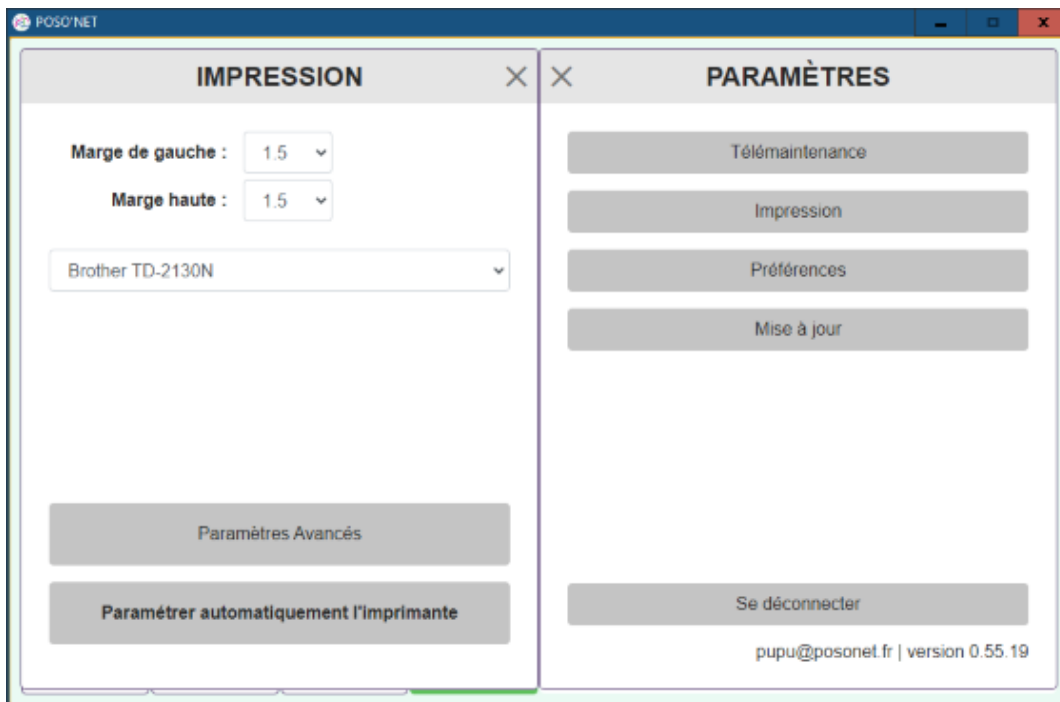


4 - Préférences

- Cocher Date (sur L1) / Nom du Patient (sur L2) / Nom du produit
- Cocher et remplir L1 : Nom de l'officine
- Cocher et remplir L2 : Numéro de téléphone de l'officine
- Cocher « Synchroniser les configurations »

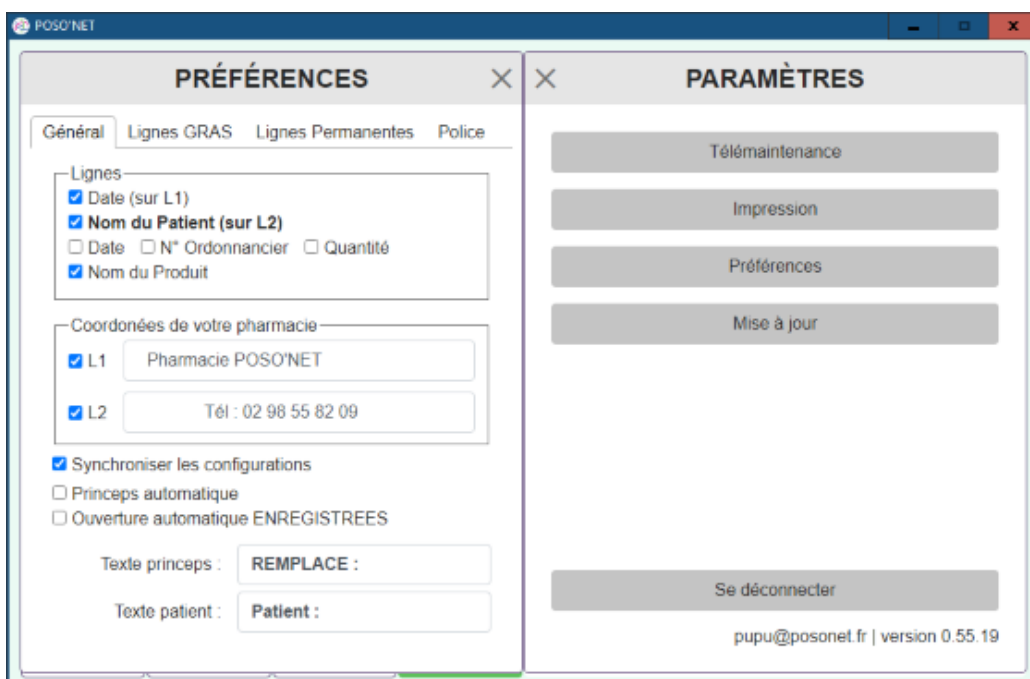

Vérification des paramètres d'impression

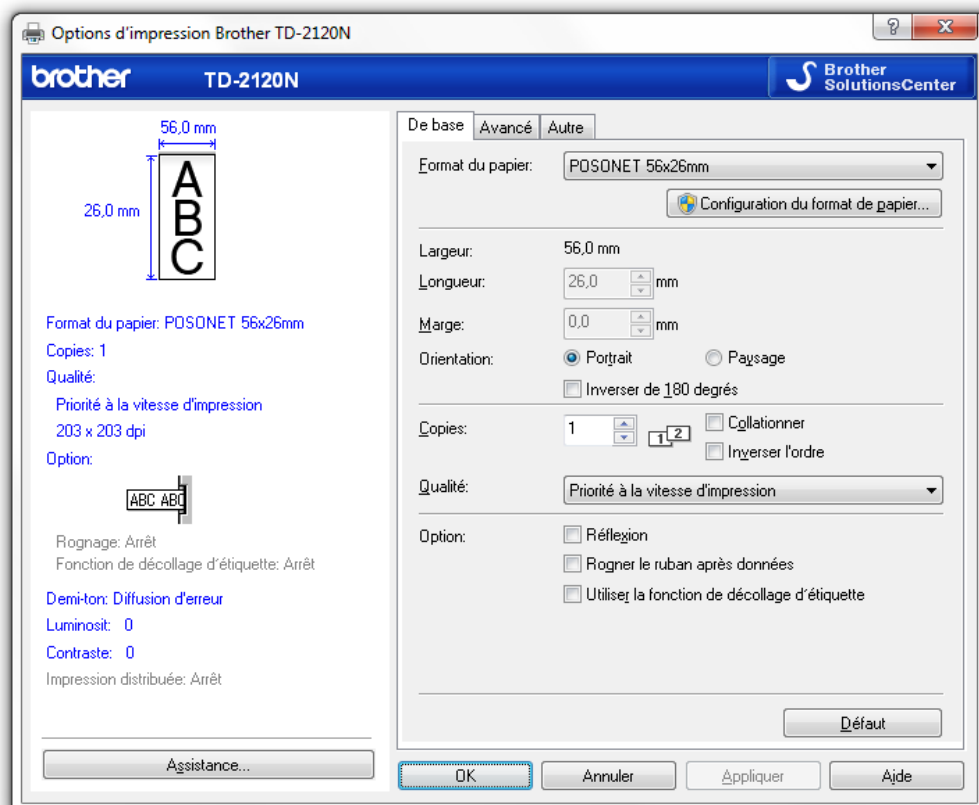

Dans les «
**Options
d'impression**
» de
l'imprimante,
vérifier que les
paramètres
POSO'NET ont
bien été pris en
compte
→ **Format du
papier :**
POSONET
56x26 mm